


Le microscope

Le microscope est un instrument indispensable en SVT, mais il ya quelques règles pour l'utiliser.

- 1 - Ce n'est pas un jouet !
- 2 - Ne jamais déplacer le microscope, c'est vous qui vous déplacez autour de la paillasse.
- 3 - Toujours faire le réglage à partir du plus petit objectif (souvent x4)
- 4 - Toujours faire le réglage en montant la platine doucement
- 5 - Toujours regarder une seule lame mince à la fois
- 6 - Ne jamais toucher avec les doigts l'oculaire ou l'objectif
- 7 - Changer les objectifs en faisant tourner le revolver, pas en poussant/tirant les objectifs

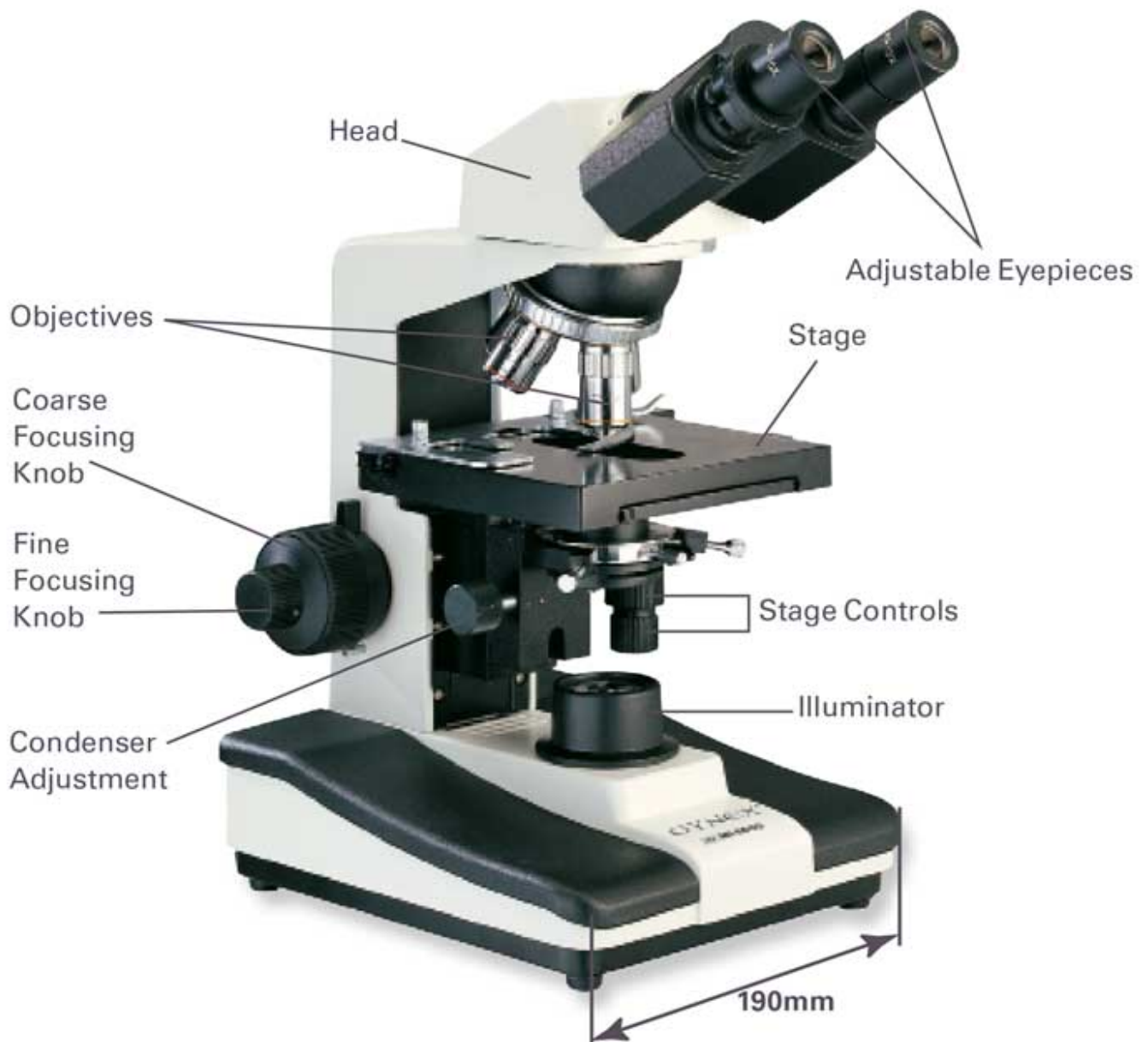

En utilisant le microscope correctement voici ce qui va se passer :

- meilleure observation
- meilleure conservation du matériel
- meilleures satisfaction du professeur
- pour chaque microscope non respecté, c'est un chaton qui souffre !

